



TURKMET A.Ş.
TEST VE KALİBRASYON UZMANI

Ostim, OSB Mah. Alinteri Bul. 1151. Sokak Gül 86 Toplu İşyeri Koop.
Küme Evleri No: 1/93 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 473 99 90 (pbx) Fax: 0312 473 99 92

www.turkmet.com.tr - info@turkmet.com.tr

TEST KONTROL KALİBRASYON RAPORU

HİZMET BİLGİLERİ	RAPOR NO:	T26010020		RAPOR TARİHİ:	06.01.2026
	UYGULAMA TARİHİ:	05.01.2026		KALİBRASYON GEÇERLİLİK	05.01.2027
	UYGULAMA YERİ:	LABORATUVAR:	☐	YERİNDE:	☒
		TESLİM TUTANAK NO:	-	NEZARET EDEN:	Yavuz ATAĞ
		TESLİM TARİHİ:	-		

DONANIM BİLGİLERİ	BİRLİK:	-		
	SAĞLIK TESİSİ:	AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	LOT/PARTİ NO:	-
			MARKA	IRON MEDICAL
	BULUNDUĞU YER:	KLİNİK 1	MODEL	-
	BULUNDUĞU BRANŞ:	KLİNİK	SERİ NO:	-
	BİYOMEDİKAL TÜR:	Tansiyon Aleti	KÜNYE NO:	-
METROLOJİ BİLGİLERİ	BİYOMEDİKAL TANIM:	ANALOG TANSİYON ALETİ	ZİMMET SAHİBİ:	-
	TEST SAYISI:		RAPOR SAYFA NO:	4
	REFERANS STANDARTLAR	1-	TS EN ISO 81060-1	
		2-	-	
		3-	-	
		4-	-	

HİZMET SONUCU	Yukarıda künye bilgileri bulunan donanım sağlık hizmet sunumunda;		
	☒ KULLANIMA UYGUNDUR.	☒ KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.	☒ SINIRLI KULLANIMA UYGUNDUR.

GENEL DEĞERLENDİRME	Cihaz ölçümünde herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Sapmalar standart değerler arasındadır. Cihaz faal bir şekilde kullanıcıya teslim edilmiştir.
---------------------	--

TARİH
05.01.2026

TESTİ YAPAN
İ. Melih SIRMAGÜL
Uzman

SORUMLU MÜDÜR
Çiğdem DUMAN

MÜHÜR



ÇEVRE ŞARTLARI	23 ± 3	°C	1010 ± 3	hPa	40 ± 10	%RH
----------------	--------	----	----------	-----	---------	-----

BİLDİRİM	Bu kapak sayfası dahil 4 sayfadandır, yukarıdaki künye bilgileri belirtilen biyomedikal donanıma özel düzenlenmiştir.
	Mühürsüz, elektronik imzasız veya ıslak imzasız raporların geçerliliği bulunmamaktadır.
	Bu rapor TURKMET A.Ş.'nin izni olmadan çoğaltılamaz, kısmi parçalar halinde kullanılamaz, değerlendirilemez.
	Bu rapor sorumlu kurum yönetiminin bilgisi dışında paylaşılamaz, dağıtılamaz, kısmen dahi olsa kullanılamaz.

 TURKMET TEST VE KALİBRASYON HİZMETİ	ANALOG TANSİYON ALETİ TEST KONTROL KALİBRASYON RAPORU	RAPOR NO
		T26010020

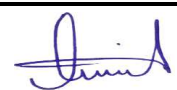
Test No	1.	Fiziksel Kontrol	EVET	HAYIR
1	Cihazda çatlamlar ve / veya kırılmalar var mı?		-	X
2	Sabit olması gereken ama hareket eden parçalar var mı?		-	X
3	Cihaza ait kablolarda yırtıklar, kopmalar veya hasar mevcut mu?		-	X
4	Cihaz üzerinde standartlara uygun etiketleme ve işaretlemeler mevcut mu?		X	-
5	Cihazın hareketli parçaları düzgün çalışmakta mı?		X	-
6	Yukarıda belirtilenlerin dışında cihazın kullanımı esnasında, gözlem ile tespit edilebilen; hastaya, operatöre ve diğer kişilere zarar verebilecek her hangi bir kusur bulunmakta mı?		-	X
7	Görsel muayene sonucu bu CİHAZ KULLANIMA UYGUN MU?		EVET	

Test No	2.	Basınç Doğruluk Testi			
TEST BİLGİLERİ	STANDART NO:	TS EN ISO 81060-1	REVİZYON TARİHİ:	2012	
	STANDART BAŞLIĞI:	İnvaziv Olmayan Tansiyon Aletleri			
	TEST MADDE NO:	7.1.1	TEST UYGULAMA TARİHİ:	05.01.2026	

REFERANS DONANIM	BİYOMEDİKAL TANIM:	ÇOK PARAMETRELİ HASTABAŞI SİMÜLATÖRÜ		
	MARKA	RIGEL	MODEL:	UNI-SİM
	LOT/PARTİ NO:	-	SERİ NO:	05Q-1054
	İZLENEBİLİRLİK	TÜBİTAK UME		
	SERTİFİKA NO:	UME G1MM-0096	GEÇERLİLİK SÜRESİ:	15.04.2026

****BÜTÜN TESTLERDE AYNI REFERANS DONANIM KULLANILMIŞTIR.**

ÖLÇÜM BİLGİLERİ	PARAMETRE TANIMI:				Ölçüm sonuçlarında belirtilmiştir.			
	ÖLÇÜLEN KATOLOG ARALIĞI:				Ölçüm sonuçlarında belirtilmiştir.			
	BELİRSİZLİK BİLEŞENLERİ		1	Sertifikadan Gelen Belirsizlik				
			2	Yıllık Kaymadan Gelen Belirsizlik				
			3	Çözünürlükten Gelen Belirsizlik				
4								
ÖLÇÜM SONUCU	Referans Değer	Ayarlanan Değer	Ölçülen (Çıkarken) (mmHg)	Ölçülen (İnerken) (mmHg)	Sapma (mmHg)	± Genişletilmiş Belirsizlik (k=2) (mmHg)	Uygunluk (IMaxSapma≤3)	
	0	0	0	0	0,0	0,01	Uygundur	
	25	26	28	26	1,0	0,01		
	50	48	48	47	-0,5	0,01		
	125	125	127	124	0,5	0,01		
	200	198	198	197	-0,5	0,01		
	250	250	252	248	0,0	0,01		

UYGUNLUK DURUMU	Cihaz ölçümünde herhangi bir problemle karşılaşmamıştır. Sapmalar standart değerler arasındadır.	ADI SOYADI:	İ. Melih SIRMAGÜL
		ÜNVANI	Uzman
		İMZA	

 TURKMET T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	ANALOG TANSİYON ALETİ TEST KONTROL KALİBRASYON RAPORU			RAPOR NO
				T26010020

Test No	3.	Hava Kaçak Testi		
TEST BİLGİLERİ	STANDART NO:	TS EN ISO 81060-1	REVİZYON TARİHİ:	2012
	STANDART BAŞLIĞI:	İnvaziv Olmayan Tansiyon Aletleri		
	TEST MADDE NO:	7.2.1	TEST UYGULAMA TARİHİ:	05.01.2026

ÖLÇÜM SONUÇLARI	Ölçüm Noktası	Kaçak Miktarı (mmHg/dak)	UYGUNLUK (ISapmal<4)
	250 mmHg	3	Uygundur
	200 mmHg	2	Uygundur
	150 mmHg	2	Uygundur
	100 mmHg	3	Uygundur
	50 mmHg	3	Uygundur

Test No	4.	Hızlı Boşaltım Testi		
TEST BİLGİLERİ	STANDART NO:	TS EN ISO 81060-1	REVİZYON TARİHİ:	2012
	STANDART BAŞLIĞI:	İnvaziv Olmayan Tansiyon Aletleri		
	TEST MADDE NO:	7.2.3	TEST UYGULAMA TARİHİ:	05.01.2026

ÖLÇÜM SONUÇLARI	Ölçülen Basınç Aralığı (mmHg)	Boşaltım Süresi (sn)	Uygunluk (Boşaltım Süresi<10sn)
	260-15mmHg	3	Uygundur
	260-15mmHg	2	Uygundur
	260-15mmHg	2	Uygundur
	260-15mmHg	3	Uygundur
	260-15mmHg	3	Uygundur

UYGUNLUK DURUMU	Cihaz ölçümünde herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Sapmalar standart değerler arasındadır.	ADI SOYADI:	İ. Melih SIRMAGÜL
		ÜNVANI	Uzman
		İMZA	

 TURKMET TÜRKİYE KALİBRASYON ENSTİTÜSÜ	ANALOG TANSİYON ALETİ TEST KONTROL KALİBRASYON RAPORU	RAPOR NO T26010020
---	--	---

Test Kontrol Kalibrasyon Raporu Bilgilendirme Sayfası

(Bu kısım Test kontrol kalibrasyon raporu hakkındaki genel bilgileri içerir.)

İçerik Hakkında:

- **Test 1. :** Fiziksel Muayene
- **Test 2. :** Basınç Doğruluk Testi
- **Test 3. :** Hava Kaçak Testi
- **Test 4. :** Hızlı Boşaltım Testi
- Testlere ilişkin bilgiler (standart numarası, ilgili maddesi/maddeleri ... v.b.) her test sayfasının başındaki test bilgileri kısmında yer almaktadır.
- Referans cihazlara ait bilgiler (marka, model, seri no, izlenebilirlik vb.) "Referans Donanım" kısmında yer almaktadır.
- Ölçüm belirsizliği hesaplarına dair veriler "Ölçüm Bilgileri" kısmında yer almaktadır.

Belirsizlik Bütçesi ve Genişletme Katsayısı Hakkında:

- Belirsizlik beyan edilen her sayfanın altında belirsizlik bütçesine katkısı olan terimler, belirsizlik tipleri ve değerleri verilmiştir.
- Tüm genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri $k = 2$ olacak şekilde verilmiştir.

Uygunluk Kriterleri Hakkında:

- Test edilen cihazın kullanıma uygun olması veya uygun olmaması kararı testin ilgili standardında belirtilen uygunluk kriterine göre verilmektedir. Kantatif ölçümlerde uygunluk kriterleri incelenirken ortalama değerlere belirsizlik terimi eklenerek yada çıkartılarak yapılmıştır.

TARİH

05.01.2026

TESTİ YAPAN

İ. Melih SIRMAGÜL
Uzman



SORUMLU MÜDÜR

Çiğdem DUMAN

